

Bipolare Koagulationszange CLASSIC
CLASSIC bipolar coagulation forceps




CLASSIC Ø 5 mm


Bipolare Koagulationszange CLASSIC
CLASSIC bipolar coagulation forceps

Die zerlegbare bipolare Koagulationszange ist ein wiederverwendbares Instrument für den Einsatz in der Laparoskopie zum Greifen und Schneiden von Gewebe bei gleichzeitiger bipolarer Koagulation. Die leichte Zerlegbarkeit ermöglicht den Einsatz verschiedener Elektroden, erleichtert die Reinigung und erhöht die Reparaturfreundlichkeit. Durch den Einsatz eines Adapters kann sie mit bipolaren Standard-Pinzettenkabeln an die meisten handelsüblichen HF-Generatoren angeschlossen werden.


The bipolar coagulation forceps which can be dismantled is a reusable instrument to be used for laparoscopy for grasping and cutting the tissue with simultaneous bipolar coagulation. The easy dismantling enables the use of different electrodes, facilitates cleaning and the execution of repair work. By using an adapter, the forceps can be connected with bipolar standard forceps cables to nearly all common high-frequency generators.

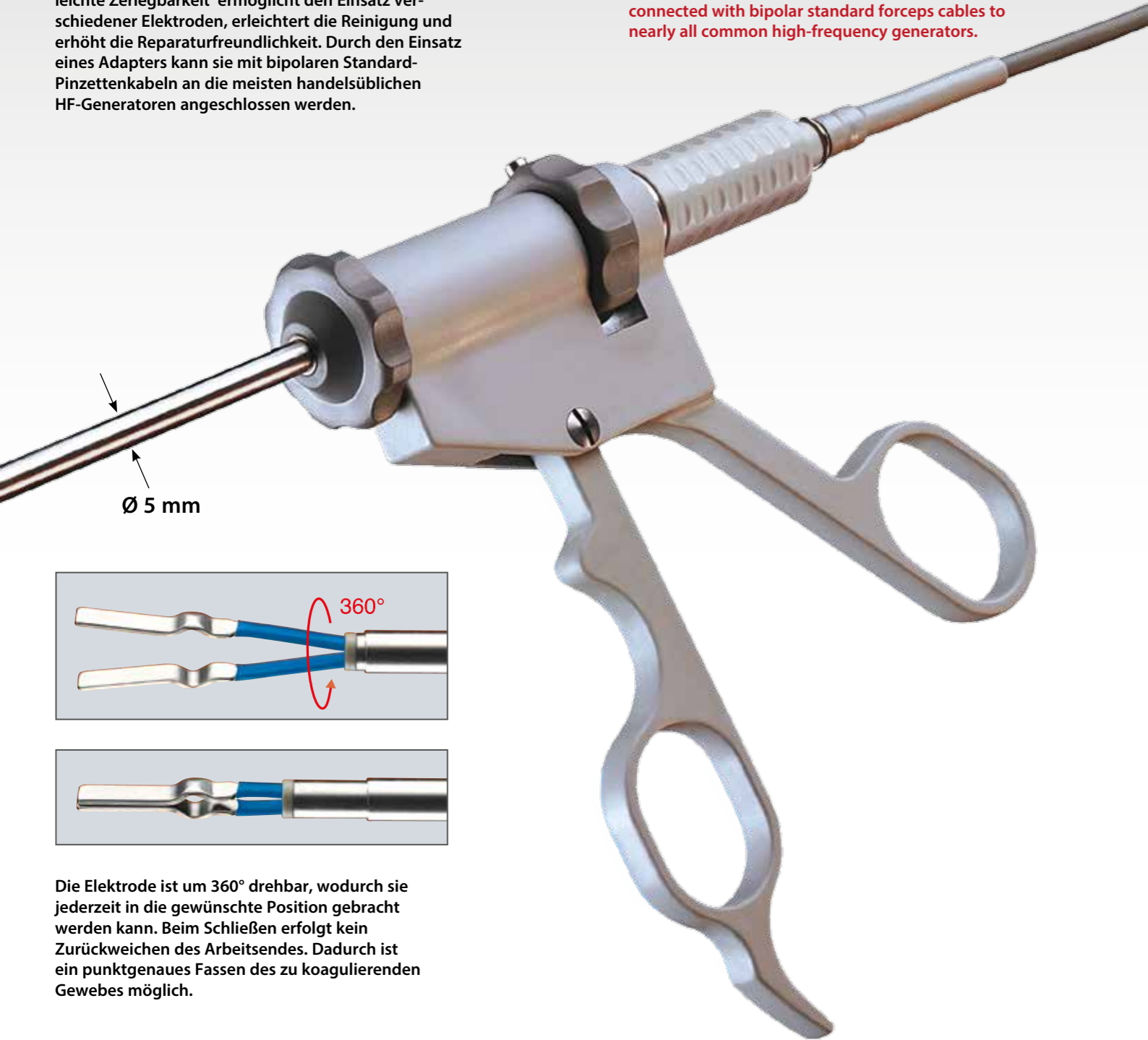

Ø 5 mm

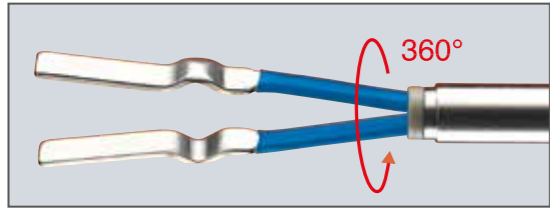


360°

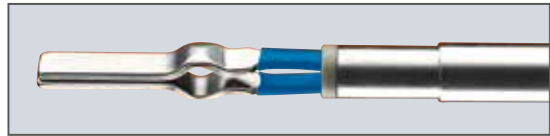

Die Elektrode ist um 360° drehbar, wodurch sie jederzeit in die gewünschte Position gebracht werden kann. Beim Schließen erfolgt kein Zurückweichen des Arbeitsendes. Dadurch ist ein punktgenaues Fassen des zu koagulierenden Gewebes möglich.

The electrode can be rotated by 360° for precise jaw orientation. The jaw does not recede when closing. This allows precise grasping of the tissue to be coagulated.

Bipolare Koagulationszange CLASSIC
CLASSIC bipolar coagulation forceps

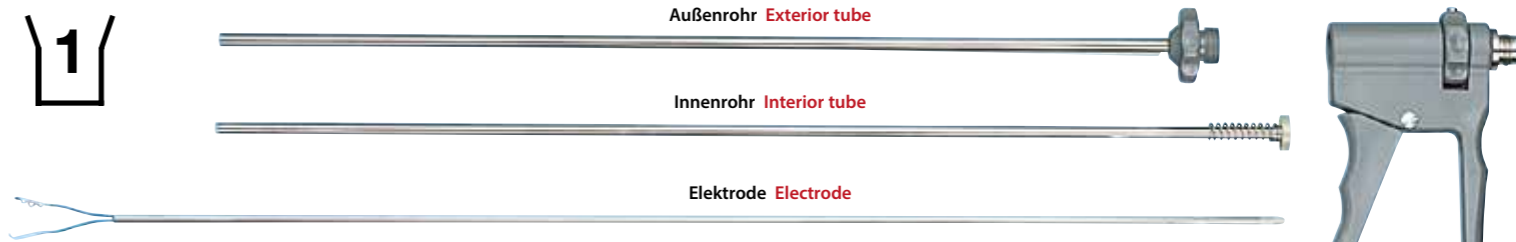

Zangenkörper Standard
Standard forceps body

Außenrohr Exterior tube

Innenrohr Interior tube

Elektrode Electrode

Zangenkörper mit Ringgriff
Forceps body, ring handle








Bipolarkabel 3 m
Bipolar cable 3 m



	Arbeitslänge Working length		
	34 cm	45 cm	20 cm
Innenrohr Interior tube	85500002	85500006	85500051
Außenrohr Exterior tube	85500003	85500007	85500052
Zangenkörper Standard Standard forceps body	85500001		
Zangenkörper, Ringgriff Forceps body, ring handle	85510001		

Bipolare Koagulationszange CLASSIC
CLASSIC bipolar coagulation forceps



	Elektroden Electrodes	Arbeitslänge Working length		
		34 cm	45 cm	20 cm
	Gewellter Steg Rippled bar	85500010	85500020	85500060
	Pinzettenspitze 1 mm Fluted tip 1 mm	85500011	85500021	85500061
	Kleppinger, gerieft Kleppinger, serrated	85500013	85500023	85500063
	Zangenart, Maul, 3 mm Tong-type bit, 3 mm	85500015	85500025	85500065
	Schere gebogen Scissors, curved	85500017	85500027	85500067
	Schere mit Hartmetallschneide, gebogen Scissors with TC blade, curved	85500018	85500028	85500068
	Dissektor Maryland, gebogen Maryland dissector, curved	85500019	85500029	85500069





Bissinger – bessere Lösungen im Blick

Bipolare und monopolare Instrumente
Zubehör für die Elektrochirurgie
Chirurgische Instrumente
Entwicklung von Instrumenten auf
Kundenwunsch
Service und Reparaturen

Bissinger – Focus on better solutions

Bipolar and monopolar instruments
Accessories for electrosurgery
Surgical instruments
Design and development of instruments
to customer specifications
Service and repair

Adapter für Standard Bipolarkabel
Adapter for standard bipolar cable






	Flachstecker Flat plug	85500400
	2-Pin-Stecker 2-pin plug	85500401

CE 0297

Günter Bissinger
Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Str.1
79331 Teningen/Germany
Tel. +49 7641 9 14 33 0
Fax +49 7641 9 14 33 33
eMail: info@bissinger.com
Internet: http://www.bissinger.com

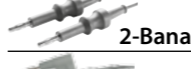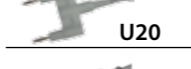

CLASSIC Bipolarkabel 3 m
CLASSIC Bipolar cable 3 m

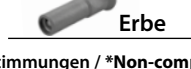	2-Banana*	85500100
	U20	85500106
	Valleylab	85500101
	Martin	85500102
	Erbe	85500103

*Entspricht nicht EU-Bestimmungen / *Non-compliant with EU standards