

# Bipolare Elektroden für die MIC

## Bipolar electrodes for MIS




**Bipolare Elektroden für die MIC Ø 5 mm**

**Bipolar electrodes for MIS Ø 5 mm**


Die bipolaren Koagulationselektroden für die Minimal-Invasive-Chirurgie ermöglichen die Dissektion und Koagulation von Gewebe. Das Sortiment umfasst Instrumente zur großflächigen wie auch zur punktförmigen Koagulation. Ausgereifte Bipolartechnologie und die optimale Anordnung der Pole zueinander machen sicheres und schonendes Arbeiten mit genau abgegrenzten Koagulationszonen möglich. Durch die zwischen den Elektroden angeordnete Isolierschicht sind ein gleich bleibender Abstand und damit konstante Koagulationsergebnisse sichergestellt.

The bipolar coagulation electrodes for minimally invasive surgery enable the dissection and coagulation of tissue. The product range comprises instruments for both extensive and pinpoint coagulation. Advanced bipolar technology and the optimum arrangement of the poles enable safe and minimally invasive working with precisely defined coagulation areas. The isolation coating between the electrodes ensures a constant distance and, therefore, provides uniform coagulation results.

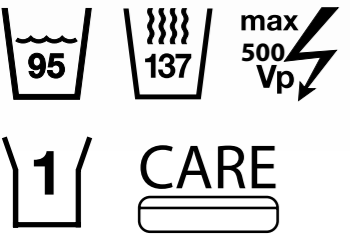

In den besonders ergonomischen Handgriff ist ein Stecker für standardisierte Bipolar-kabel zum Anschluss an praktisch alle gebräuchlichen HF-Generatoren fest integriert.

The plug for standardized bipolar cables, which enables the connection to nearly all common high-frequency generators, is integrated in the particularly ergonomic handle.

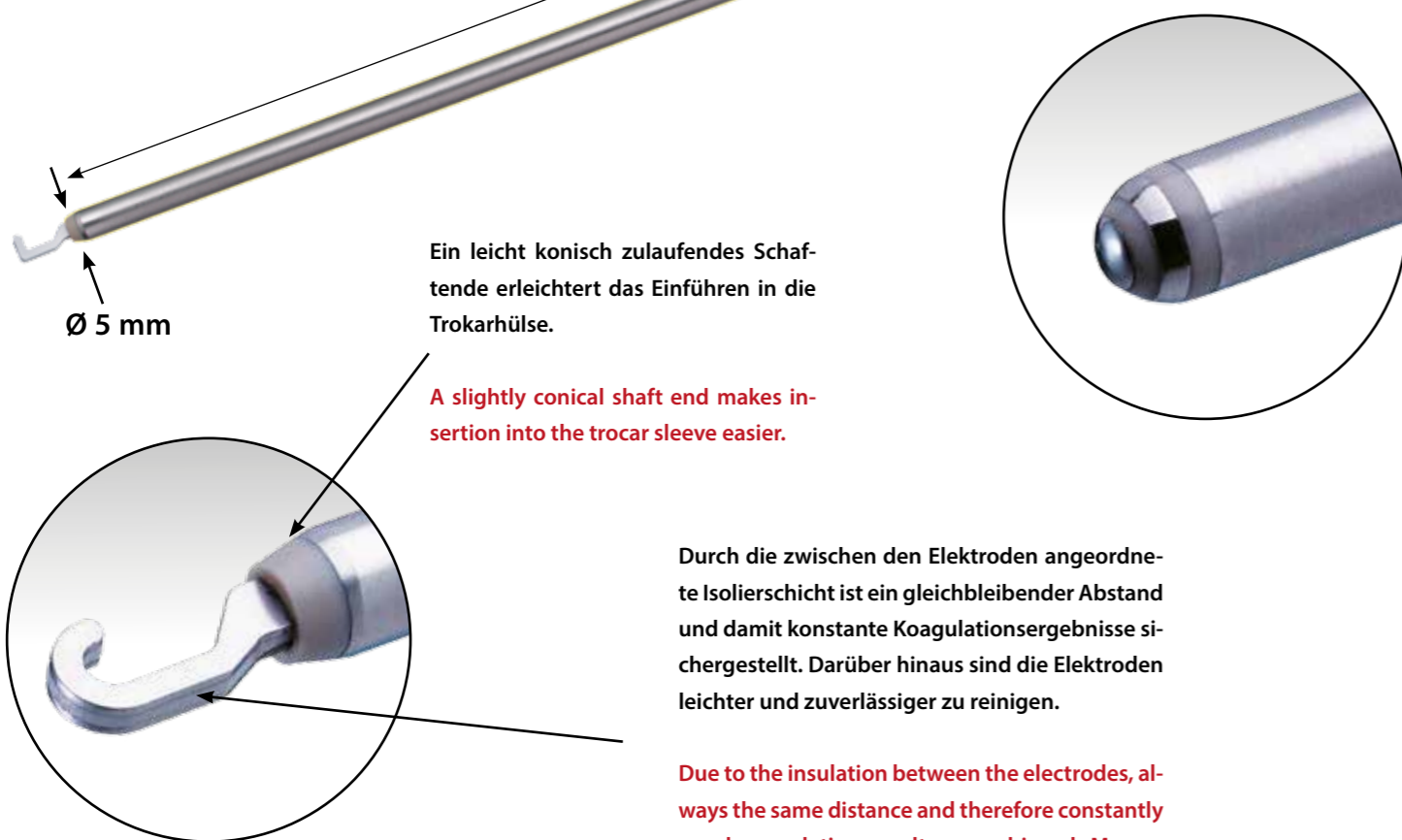

Ein leicht konisch zulaufendes Schaftende erleichtert das Einführen in die Trokarhülse.

A slightly conical shaft end makes insertion into the trocar sleeve easier.

Durch die zwischen den Elektroden angeordnete Isolierschicht ist ein gleichbleibender Abstand und damit konstante Koagulationsergebnisse sichergestellt. Darüber hinaus sind die Elektroden leichter und zuverlässiger zu reinigen.

Due to the insulation between the electrodes, always the same distance and therefore constantly good coagulation results are achieved. Moreover, the electrodes are easier and more reliable to clean.

Durch den Einsatz der Bipolartechnologie und die optimale Anordnung der Pole zueinander ist ein sicheres und schonendes Arbeiten mit genau abgegrenzten Koagulationszonen möglich.

Using bipolar technology and the optimized configuration of the electrical poles, guarantees safe and gentle work with an exactly defined area of coagulation.




J-Haken J-hook    L-Haken L-hook    Spatel Spatula    Kuppel Dome

85600100    85600200    85600300    85600400




Bipolare Elektroden für die MIC Ø 3 mm SLIMLINE

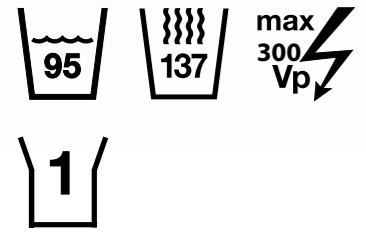Bipolar electrodes for MIS Ø 3 mm SLIMLINE





SLIMLINE Koagulationsinstrumente mit einem Schaftdurchmesser von nur 3 mm ermöglichen feinstes Arbeiten in der Laparoskopie bei einer nur minimalen Inzision. Zum Anschluss dient ein bipolares Standard-Pinzettenkabel mit Flachstecker.

SLIMLINE coagulation instruments with a shaft diameter of only 3 mm enable precise working during laparoscopy with only minimum incision. The connection is ensured by a bipolar standard cable with flat plug.

			Ø 3 mm
Bipolarer L-Haken Bipolar L-hook	Bipolarer V-Haken Bipolar V-hook	Bipolare Nadel Bipolar needle	
85630200	85630700	85630600	

Bipolare Elektroden für die MIC

Bipolar electrodes for MIS Ø

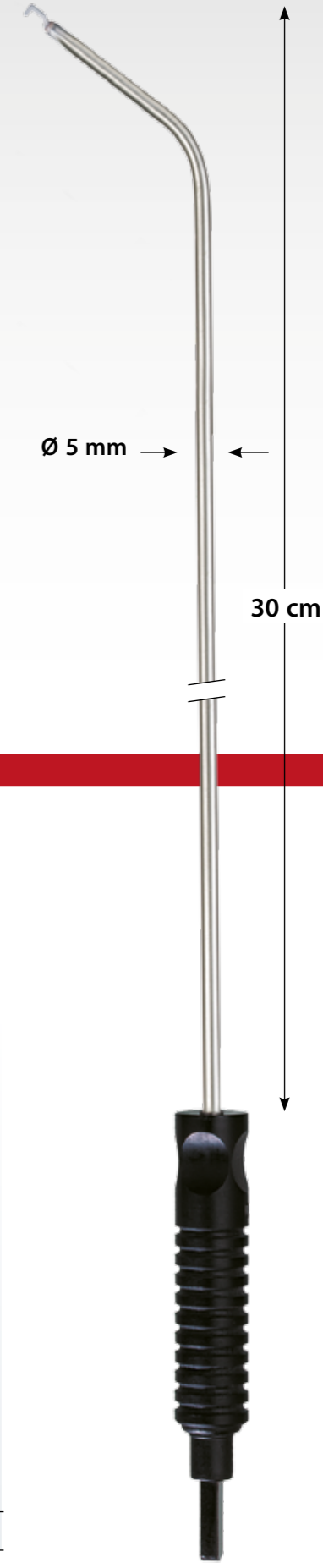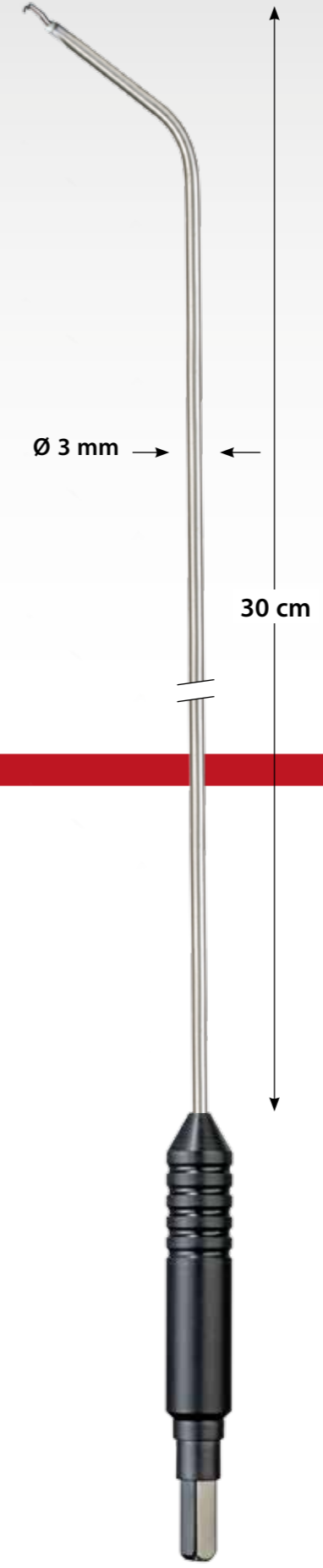

	1:1
L-Haken L-hook	
85630201	

	1:1
L-Haken L-hook	
85600201	



**Bissinger – bessere Lösungen im Blick**

Bipolare und monopolare Instrumente  
 Zubehör für die Elektrochirurgie  
 Chirurgische Instrumente  
 Entwicklung von Instrumenten auf  
 Kundenwunsch  
 Service und Reparaturen

**Bissinger – Focus on better solutions**

Bipolar and monopolar instruments  
 Accessories for electrosurgery  
 Surgical instruments  
 Design and development of instruments  
 to customer specifications  
 Service and repair

2-Bananenstecker* 	3 m	Art. No. 80100010
	5 m	Art. No. 80100013
U20 	4 m	Art. No. 80100260
Erbe 	3 m	Art. No. 80100017
	5 m	Art. No. 80100018
Martin, Berchtold Aesculap GK 55, GK 60 	3 m	Art. No. 80100019
	5 m	Art. No. 80100020
Valleylab, Lamidey, EMC 	3 m	Art. No. 80100021
	5 m	Art. No. 80100022

**CE 0297**

**Günter Bissinger**

**Medizintechnik GmbH**

Hans-Theisen-Str.1

79331 Teningen/Germany

Tel. +49 7641 9 14 33 0

Fax +49 7641 9 14 33 33

eMail: [info@bissinger.com](mailto:info@bissinger.com)

Internet: <http://www.bissinger.com>

\*Entspricht nicht EU-Bestimmungen

\*Non-compliant with EU standards